

YURI

STYLING POLE

うしろ姿も、
美しく

PRODUCED BY THERAPIT
MADE IN JAPAN



歩行から理想のスタイルへ

AYURI STYLING POLEは、リハビリテーションのノウハウによって生まれた新しいウォーキングポールです。特許技術を取得した独自構造によって、正しい歩行姿勢をサポートします。さらに肩甲骨の動きが活発になることで背中周りの代謝が上がり、運動効率を高め、スタイルアップも期待できます。風に揺られる百合の花のように、しなやかなで美しいしる姿へ。



15° GRIP

ポール使用時でも自然なウォーキングスタイルを崩さないように、シャフトに15度の曲げ加工を施してあります。



9cm BENDING

9cm前方に屈曲した2本のポールによって、体の前方に支持基底面が拡がり、立位姿勢・歩行姿勢の安定につながります。また、ポール先端が自然に身長に応じた標準的な歩幅の位置に着地するため、歩幅の目安にもなります(特許権取得済)。

特許取得



通常の歩行時と比べ、歩幅を広げて上体を支えることで、理想的な歩行姿勢へと導き、美しいスタイルをキープします。




歩行時の理想的な肘の角度である約90°を保ち、肩甲骨の稼働幅を広げ、代謝を高めます。(一般的な歩行時と比べて約20%のエネルギー消費量UP)

AYURI

STYLING POLE

- 商品名 : AYURI STYLING POLE
カラー : Red & Red / Red & Navy
: Red & Gold
: Purple & Red / Purple & Navy
: Purple & Gold
: Gold & Red / Gold & Navy
: Gold & Gold
対応身長 : 140~180cm
長さ : 90~115cm
質量 : 約510g / 2本1組
シャフト : アルミ合金
産地 : 長野県小諸
ロット : 1

※商品デザイン、仕様は変更になる
可能性があります。

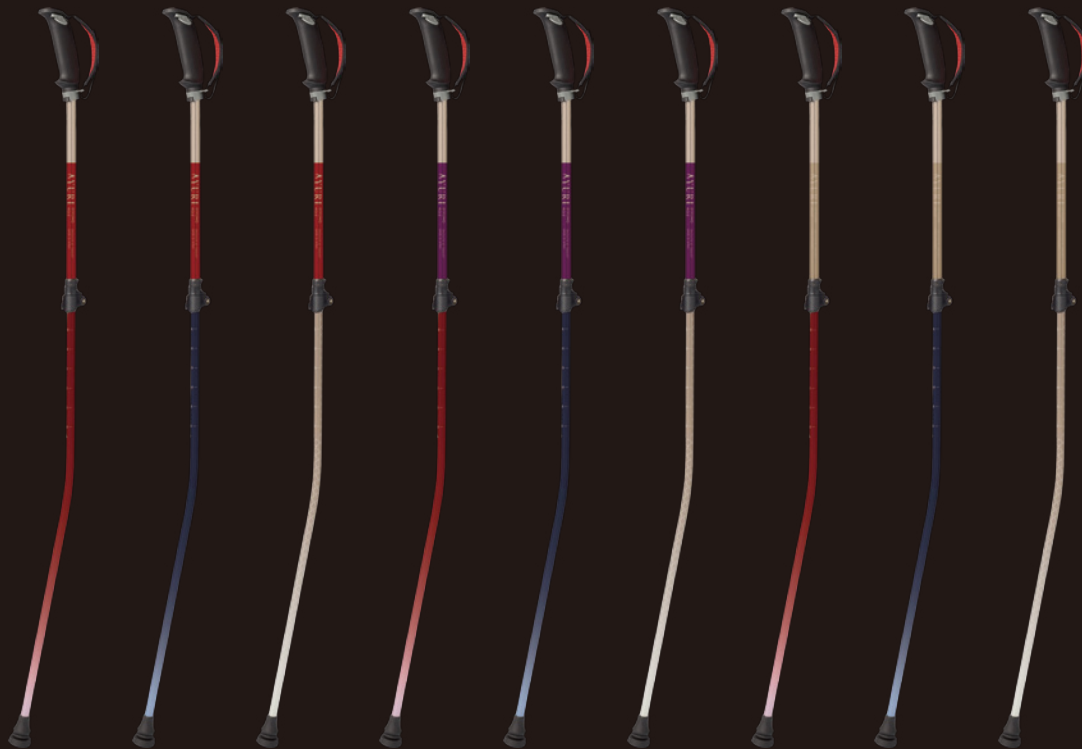

Red & Red

Red & Navy

Red & Gold

Purple & Red

Purple & Navy

Purple & Gold

Gold & Red

Gold & Navy

Gold & Gold

販売元

Therapit Inc.

〒651-2109 神戸市西区前開南町 2-13-14 TEL. 078-945-6500 FAX. 078-945-6501
HP. <https://www.reha-reha.jp/>

製造元

KIZAKI.,CO.LTD

〒384-0061 長野県小諸市大字加増字上の平 561-2
HP. <http://www.kizaki-net.co.jp/>

AYURI
STYLING POLE